

# 纽白特**激活**亲水仪

## 10秒唤醒种植体亲水性



### 移动感应器

非触摸性操作，防止交叉感染

感应控制

1秒感应(LED颜色: 绿): 开/关

紫外线程序控制

2秒感应(LED颜色: 绿->蓝): 开始

### 语音提示功能

紫外线照射语音缓解患者不安心理

语音提示

- LCD屏幕中操作流程变换时伴随语音提示

### 5"LCD触摸面板

操作简单的触摸面板

设置模式

- 开/关/开始

- UV照射流程完成

- 感应器开/关设置

- 语言选择 (韩语/中文/英语)

- 音量

### 安全性高，操作便利

智能操作

臭氧感应装置

- 可感应到臭氧的泄露，保障使用者安全

LED效果好

- UV照射，动作感应等直观性操作

充值卡


- 处理前插入充值卡，设备显示使用次数

## 配件构成




## 亲水性测试

UV照射前亲水性弱

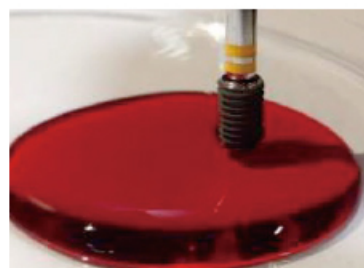

UV照射后亲水性强

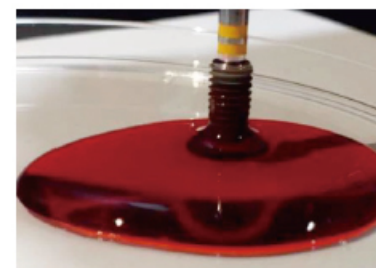

强化骨附着性，缩短愈合时间

## 配件

名称	配件	
种植体配件工具箱	种植体支撑	常型3ea 窄型1ea
	种植体固定夹	2ea
RFID充值卡	1ea	

## 规格

名称	单位	型号
额定功率	-	ac 100 - 240V, 50/60Hz
耗电量	W	170
适配器功率	V	DC 24
	W	250
尺寸	mm	W336 X L185 X H330
重量	kg	6
臭氧产生量	ppm	0.05以下
处理时间	s	10
波长	nm	172